

关键技术指标	
球囊直径 (mm)	1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0
球囊长度 (mm)	5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30
公称压力 (atm)	6
额定爆破压 (atm)	14
远端外径	2.36F (ø1.0-1.75mm)、2.55F (ø2.0-3.0mm)、2.7F (ø3.25-4.0mm)
近端外径	1.9F (0.63mm)
尖端长度(mm)	1.5mm、2.0mm、2.5mm
导管长度 (cm)	140
涂层	Slider™ 亲水涂层导管外表面
	Eel™ 硅油涂层导丝腔

订购信息表								
球囊直径	球囊长度 / 产品编码							
	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm	30mm
1.0mm	823-1005	823-1008	823-1010	823-1012	823-1015	823-1020	823-1025	823-1030
1.25mm	823-1205	823-1208	823-1210	823-1212	823-1215	823-1220	823-1225	823-1230
1.5mm	823-1505	823-1508	823-1510	823-1512	823-1515	823-1520	823-1525	823-1530
1.75mm	823-1705	823-1708	823-1710	823-1712	823-1715	823-1720	823-1725	823-1730
2.0mm	823-2005	823-2008	823-2010	823-2012	823-2015	823-2020	823-2025	823-2030
2.25mm	823-2205	823-2208	823-2210	823-2212	823-2215	823-2220	823-2225	823-2230
2.5mm	823-2505	823-2508	823-2510	823-2512	823-2515	823-2520	823-2525	823-2530
2.75mm	823-2705	823-2708	823-2710	823-2712	823-2715	823-2720	823-2725	823-2730
3.0mm	823-3005	823-3008	823-3010	823-3012	823-3015	823-3020	823-3025	823-3030
3.25mm	823-3205	823-3208	823-3210	823-3212	823-3215	823-3220	823-3225	823-3230
3.5mm	823-3505	823-3508	823-3510	823-3512	823-3515	823-3520	823-3525	823-3530
3.75mm	823-3705	823-3708	823-3710	823-3712	823-3715	823-3720	823-3725	823-3730
4.0mm	823-4005	823-4008	823-4010	823-4012	823-4015	823-4020	823-4025	823-4030

更多资讯，请联系当地销售代表或发邮件至 sales@brosmed.com 查询



广东博迈医疗器械有限公司
Brosmed Medical Co., Ltd.
广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号15栋301室
Tel: +86 769 2289 2018 Fax: +86 769 2289 2016 E-mail: sales@brosmed.com

优游®

Ultratimes®

半顺应性冠状动脉球囊扩张导管

随心而动 畅游心间


www.brosmed.com

卓越推送性能

- 新型的推送内杆设计
- “撑杆跳”与激光螺旋切割海波管的抗折与推送设计
- Linear-Gradient均匀渐细过渡钢丝技术

保证力的无缝传递与精准操控，优异的推送性能超群绝伦，可轻松穿越复杂病变。

冠脉介入模型中推送距离

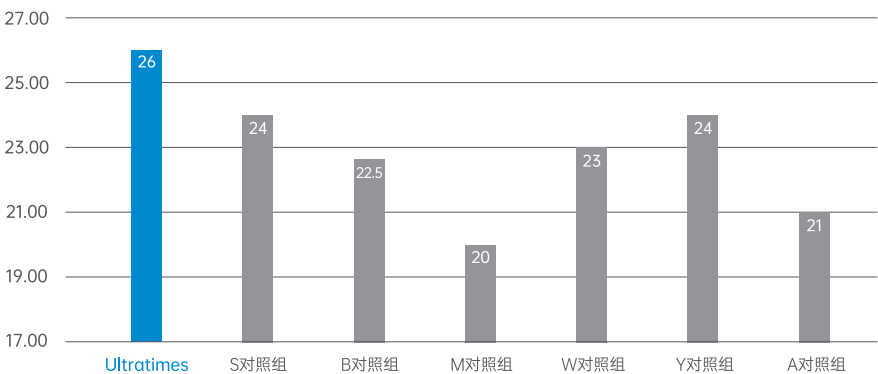


在冠脉介入模型中，球囊沿导丝推送到迂曲远端的距离越远，推送性能越佳。

顶尖球囊技术

Multi-Control球囊工艺
精密控制成形使囊体韧性变强，保证极致通过性同时提升在CTO/钙化病变中的抗压性能。

极限爆破压力

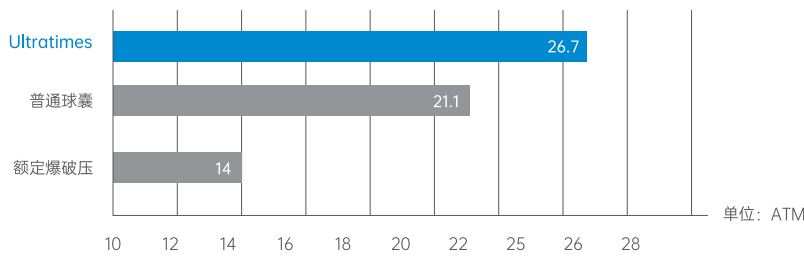

额定爆破压为14ATM的球囊，普通的球囊的平均爆破压为21.1ATM，使用Multi-Control技术的Ultratimes平均破压力高达26.7ATM，大幅提高抗压能力。


极细的TIP头端

0.016"的头端纤细外径
激光技术工艺提高了头端对导丝的无缝包裹以及整体的尖端性能。

超强的抗抱丝性能

新型的推送内杆设计
提供出类拔萃的支撑能力，多次充压泄压依然操控始终如一。

推送力

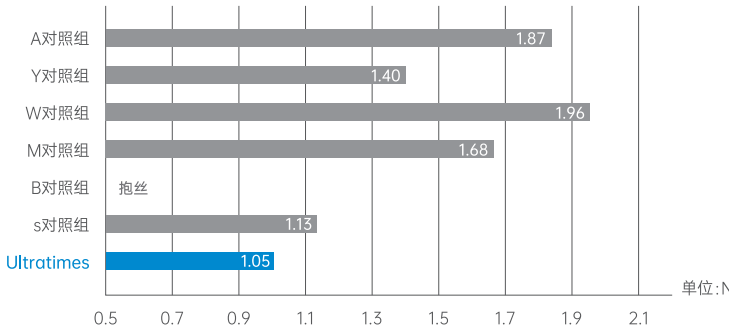

球囊导管充压至RBP10次循环，泄压后，推送球囊沿导丝行走所施加的力越小，其内管的抗压抗抱丝能力越强。